

NoDec[®] E

MATRATZENERSATZ-
SYSTEM FÜR PATIENTEN
MIT MITTLEREM BIS
HÖCHSTEM
DEKUBITUSRISIKO


DOPPELLAGIGES
ANTIDEKUBITUSSYSTEM
FÜR PATIENTENKOMFORT
UND STABILITÄT

WECHSELDRUCK UND
STATIKFUNKTION



WENN LEISTUNG UND PATIENTENKOMFORT ZÄHLEN

- Einfache Bedienung und Einstellung der Betriebsart durch klare Displayanzeige
- Sicherheit durch akustische und optische Alarmfunktionen
- Automatische Druckeinstellung auf das Patientengewicht
- Sicherheit in allen Notfallsituationen durch einfache und schnelle Entlüftung des NoDec CPR Ventils
- Geeignet für Patienten bis 220 kg mit mittlerem bis höchstem Dekubitusrisiko
- Hoher Liegekomfort durch zweilagigen Matratzenaufbau und Seitenstabilisatoren
- Statischer Modus für Patientenkomfort und ruhigen Schlaf
- Verschleißarm und wartungsfreundlich durch Mikroprozessorsteuerung
- Hoher Patientenkomfort durch besonders geräuscharmes Aggregat
- 2-Zellen Wechseldruck-Technologie
- Der dreiteilige Matratzenaufbau ist besonders für Gelenkbetten geeignet
- Hautfreundlicher, desinfizier- und waschbarer, bi-elastischer Bezug bietet optimale Hygiene und Minimierung der Scherkräfte

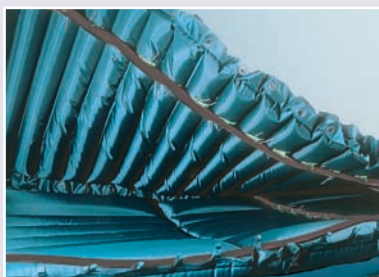

TECHNISCHE DATEN



Matratze	
Abmessungen	190 x 90 x 23 cm (LxBxH)
Material	Polyester mit Polyurethan
Reinigung	Bezug waschbar bei 90 °C, Desinfektion mit DGHM gelisteten Desinfektionsmitteln
Aufbau	2 Lagen, 18 Querzellen, 7 statische Längszellen
Patientengewicht	bis 220 kg

Aggregat	
Abmessungen	48 x 15 x 30 cm (LxTxH)
Gewicht	5,5 kg
Zyklusdauer	10 Minuten
Netzanschluss	230 V / 50 Hz
Stromaufnahme	30 W

© 2012 GerroMed Pflege- und Medizintechnik GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Alle in dieser Produktinformation genannten Handelsmarken und Trademarks (TM) sind Eigentum von GerroMed und deren Lizenzgebern. Handelszeichen mit dem Symbol ® sind international registrierte und geschützte Warenzeichen. GerroMed-Produkte sind durch Patente geschützt. Diese Produktinformation ist zur Verteilung im deutschsprachigen Handelsraum bestimmt. Änderungen zu technischen und medizinischen Aussagen vorbehalten. Weiterführende Produktinformationen entnehmen Sie bitte den jeweiligen Gebrauchsanleitungen.
Stand der Informationen: August 2013

Wir sind zertifiziert
nach DIN EN ISO13485



DB/ND_E/11-14

GerroMed

GerroMed Pflege und Medizintechnik GmbH

Papenreye 55 · D - 22453 Hamburg · Telefon 040 / 54 73 03-0 · Fax 040 / 54 73 03-33 · www.gerromed.de · mail@gerromed.de