


MEDIFLEX® **NEU**

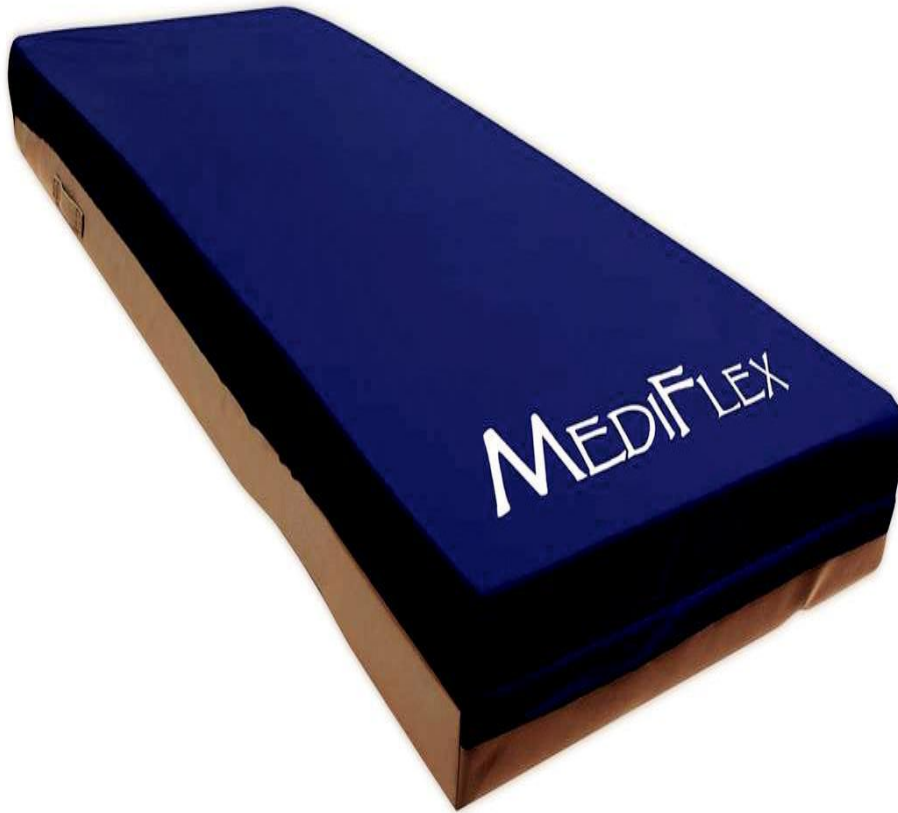

**NON-ENERGETISCHE
DRUCKENTLASTUNG
ZUR DEKUBITUS-
PROPHYLAXE
UND -THERAPIE**

**DURCH EINSATZ EINES
AGGREGATS
ALS ENERGETISCHES
WECHSELDRUCKSYSTEM
EINSETZBAR**

**PATIENTENSICHERHEIT
DURCH RANDZONEN-
VERSTÄRKUNG**



Grundversorgung für Dekubitusprophylaxe und – therapie

- Die ideale Kombination aus Weichlagerung und Wechseldrucktherapie
- Automatische Druckeinstellung auf das Patientengewicht durch ein spezielles Ventilsystem
- Bei Bedarf kann das System zusätzlich mit Wechseldruck versehen werden
- Der viskoelastische Gelschaumstoff mit der iKool™ Technologie trägt zur Kühlung und besseren Luftzirkulation am Patienten bei
- Der mit einer speziellen Wabenstruktur ausgestattete Fußteil der Matratze führt zu einer zusätzlichen Druckentlastung des kritischen Fersenbereiches
- Ventilverbindung sichert ein Luft- und Wasser undurchlässiges, geschlossenes System
- Bi-elastischer Bezug inkl. umlaufenden verdeckten Reißverschluss bietet optimale Hygiene sowie Minimierung der Scherkräfte


Komplett verschweißter bi-elastischer Bezug (10.000ppm Chlor resistent)




Bienenwaben-Gelstruktur



Viskoelastischer Gel-Schaumstoff

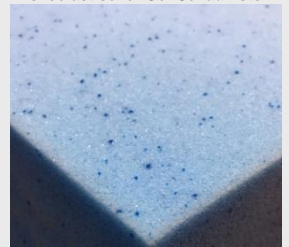

Aufbau der Matratze:

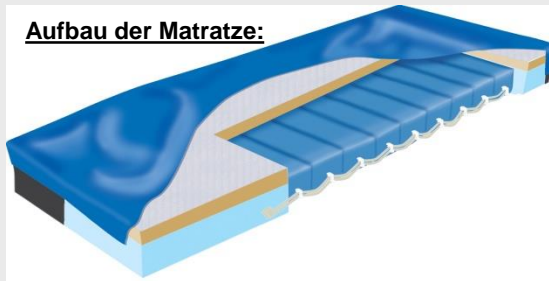

- Bi-elastischer Bezug (wasserdicht)
- Luftschicht (dreidimensional geknüpfter Stoff)
- Bienenwaben-Gelstruktur (Fußbereich)
- Viskoelastischer Gel-Schaumstoff (niedrige Dichte)
- Viskoelastischer Schaumstoff (hohe Dichte)
- Hochbelastbarer Kaltschaum

Ventilverbindung (Infektionskontrolle)



Selbstregulierendes Ventilsystem



Technische Daten

Matratze		Aggregat	
Abmessung	198x87x17cm LxBxH)	Abmessung	16,0x8,5x15,5cm (LxBXH)
Gewicht	14kg	Gewicht	1,5 kg
Material Bezug	Polyurethan Nylon	Zyklusdauer	10 Min.
Reinigung Bezug	Waschbar bei 90°C Desinfektion mit VAH und RKI gelisteten Desinfektionsmitteln	Netzanschluss	230V/50 Hz 0,2 Amp.
Patientengewicht	30 bis 200 kg	Stromaufnahme	0,2 Amp.

© 2018 GerroMed Pflege- und Medizintechnik GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Alle in dieser Gebrauchsanweisung genannten Handelsmarken sind Eigentum von GerroMed oder deren Lizenzgebern. Handelszeichen mit dem Symbol © sind international registrierte und geschützte Warenzeichen. GerroMed-Produkte sind durch Patente geschützt. Diese Gebrauchsanweisung ist zur Verteilung im deutschsprachigen Handelsraum bestimmt. Änderungen zu technischen und medizinischen Aussagen vorbehalten.

GerroMed Pflege- und Medizintechnik GmbH
Papennreye 55, 22453 Hamburg
TEL: 040-54 73 03-0
FAX: 040-54 73 03-33
Mail: mail@gerromed.de

Wir sind zertifiziert nach
DIN EN ISO 13485



Hersteller:
Meditec Medical Ltd., England/Ireland