


NoDec® AIRSTREAM

MATRATZENAUFBLÄHUNG
UND -ERSATZSYSTEM
FÜR PATIENTEN
MIT NIEDRIGEM
BIS MITTLEREN
DEKUBITUSRISIKO

PATIENTENSICHERHEIT
DURCH
SEITENSTABILISATOREN

WECHSELDRUCK- UND
STATIKFUNKTION

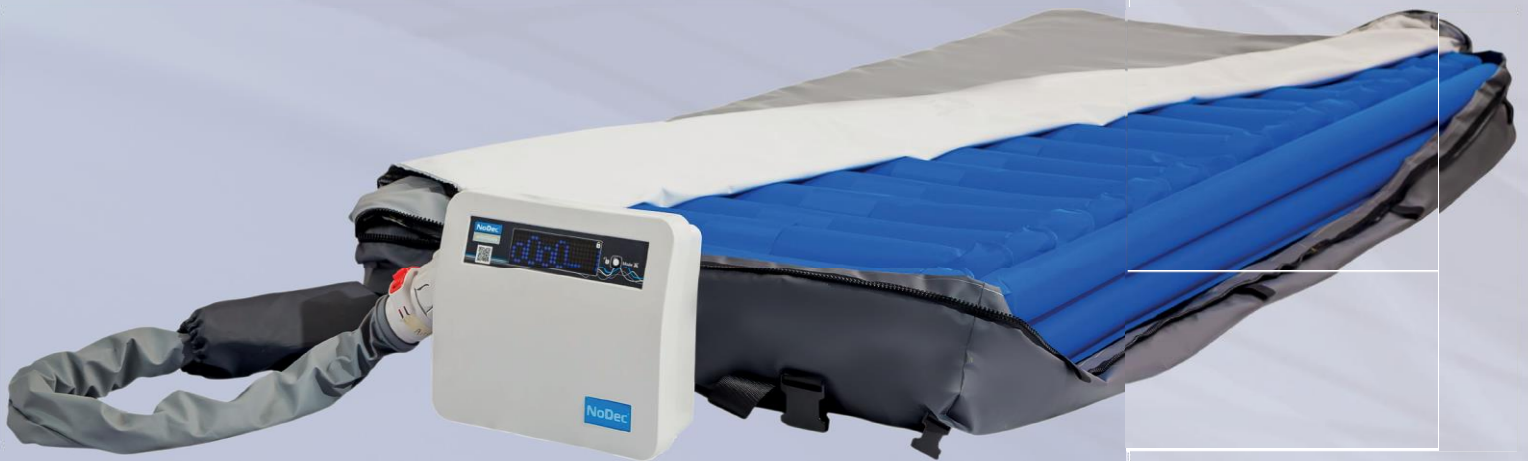

NEU!
NoDec® AIRSTREAM

- WAHLWEISE WECHLAGERUNG
- BIS KATEGORIE 3 (EPUAP)

GRUNDVERSORGUNG UND PATIENTENSTABILISATION FÜR DEKUBITUSPROPHYLAXE UND -THERAPIE

- Einfache Bedienung und Einstellung der Betriebsart durch klare Displayanzeige
- Sicherheit durch akustische und optische Alarmfunktionen
- Automatische Druckeinstellung auf das Patientengewicht und Positionswechsel
- Sicherheit in allen Notfallsituationen durch einfache und schnelle Entlüftung des NoDec CPR Ventils
- Geeignet für Patienten bis maximal 180 kg Gewicht
- Statischer Modus für Patientenkomfort und ruhigen Schlaf
- Verschleißarm und wartungsfreundlich durch Mikroprozessorsteuerung
- Hoher Patientenkomfort durch besonders geräuscharmes Aggregat
- 2-Zellen Wechseldruck-Technologie
- Seitenstabilisatoren zur Unterstützung der Mobilisation
- Hautfreundlicher, desinfizier- und waschbarer, bi-elastischer Bezug bietet optimale Hygiene und Minimierung der Scherkräfte
- Weichlagerungsfunktion bei Statik- und Wechseldruckfunktion wählbar



2 Zellen-Zyklus



TECHNISCHE DATEN



Matratze	
Abmessungen	200 x 85 x 16* / 12 cm (LxBxH)
Material	Polyester mit Polyurethan
Reinigung	Bezug waschbar bei 90 °C, Desinfektion mit VAH gelisteten Desinfektionsmitteln
Patientengewicht	30 bis 180 kg
Aufbau	2 Lagen, 17 Querzellen, 2 Längszellen *inkl. 4 cm Schaumstoff

Aggregat

Abmessungen	35 x 16 x 25 cm (LxTxH)
Gewicht	2,8 kg
Zyklusdauer	10 Minuten
Netzanschluss	230 V / 50 Hz
Stromaufnahme	0,5 Amp. / 20 W

© 2017 GerroMed Pflege- und Medizintechnik GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Alle in dieser Produktinformation genannten Handelsmarken und Trademarks (TM) sind Eigentum von GerroMed und deren Lizenzgebern. Handelszeichen mit dem Symbol ® sind international registrierte und geschützte Warenzeichen. GerroMed-Produkte sind durch Patente geschützt. Diese Produktinformation ist zur Verteilung im deutschsprachigen Handelsraum bestimmt. Änderungen zu technischen und medizinischen Aussagen vorbehalten. Weiterführende Produktinformationen entnehmen Sie bitte den jeweiligen Gebrauchsanleitungen.
Stand der Informationen: Oktober 2017

Wir sind zertifiziert nach
DIN EN ISO 13485:2016



GerroMed

GerroMed Pflege und Medizintechnik GmbH

Papenreye 55 · D - 22453 Hamburg · Telefon 040 / 54 73 03-0 · Fax 040 / 54 73 03-33 · www.gerromed.de · mail@gerromed.de