

iSURO med DE



**WEICHLAGERUNGS-
SYSTEM MIT
SPEZIELLER VACO12-
KÜGELCHENFÜLLUNG**

**DEKUBITUS-
PROPHYLAXE BIS ZU
SEHR HOHEM RISIKO**

**DEKUBITUSTHERAPIE
BIS GRAD 4 (EPUAP)**


**PATIENTENGEWICHT
VON 30 BIS 110 KG
VON 110 BIS 150 KG**

**SEHR GUTE
DRUCKVERTEILUNG
BEI ERHALTUNG DER
KÖRPERWAHR-
NEHMUNG**

**POSITIONSUNTER-
STÜTZUNG OHNE
ZUSÄTZLICHE
HILFSMITTEL**

SICHERE VERSORGUNG - WARTUNGSARM, PATIENTEN- UND BEDIENERFREUNDLICH

- Maximierte Auflagefläche und optimale Druckverteilung durch die spezielle iSU-Schicht
- Effektiver Einsatz bei der Dekubitusprophylaxe und -therapie
- Bequeme Lagerung und hoher Liegekomfort besonders für Schmerzpatienten
- Erhaltung der Körperwahrnehmung
- Lagerungsunterstützung ohne Hilfsmittel
- Hohllagerung
- 30°-Lagerung
- Mikrolagerung
- Atmungsaktiver, bi-elastischer Syn-Bezug
- Randzonenverstärkung

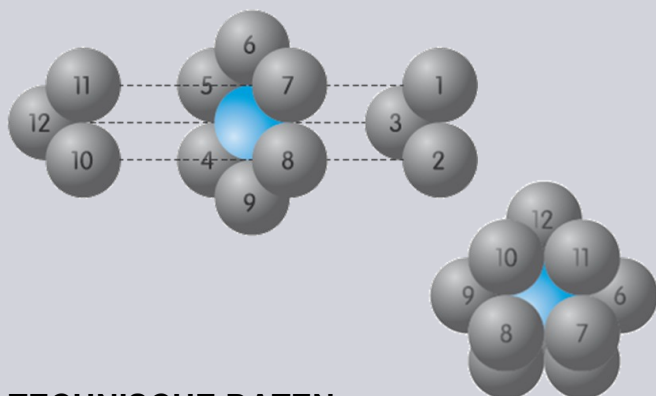

DAS VACO12 WIRKPRINZIP

VACO12 besteht aus Kügelchen, die sich automatisch an jeden beliebigen Körper anpassen. Jedes davon hat bei maximaler Packungsdichte 12 Kontaktpunkte mit benachbarten Kügelchen. Über diese 12 Kontaktpunkte wird die Energie multidimensional an die 12 benachbarten Kügelchen weitergegeben. Dieser Effekt wiederholt sich, bis die Energie komplett verteilt ist.

TECHNISCHE DATEN



Abmessungen (L x B x H) iSURO med DE 110 iSURO med DE 150	200 x 90 x 15 cm 200 x 90 x 18 cm
Patientengewicht iSURO med DE 110 iSURO med DE 150	30 bis 110 kg 110 bis 150 kg
Eigengewicht	13 bzw. 15 kg
Aufbau	iSU-Schicht mit hochelastischem Syn-Bezug in Schaumstoffrahmen
Material Bezug	Bi-elastischer, atmungsaktiver und wasserabweisender Schutzbezug Polyurethan beschichtetes Polyamid Latex-Frei
Reinigung	Bezug waschbar bis 60 °C, Wischdesinfektion mit gelisteten* aceton- und/oder chlorfreien Reinigungs- und Desinfektionsmitteln Reinigungsanleitung über GerroMed erhältlich

Hilfsmittelnummer: 11.29.12.0002

© 2014 GerroMed Pflege- und Medizintechnik GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Alle in dieser Produktinformation genannten Handelsmarken und Trademarks (TM) sind Eigentum von GerroMed und deren Lizenzgebern. Handelszeichen mit dem Symbol ® sind international registrierte und geschützte Warenzeichen. GerroMed-Produkte sind durch Patente geschützt. Diese Produktinformation ist zur Verteilung im deutschsprachigen Handelsraum bestimmt. Änderungen zu technischen und medizinischen Aussagen vorbehalten. Weiterführende Produktinformationen entnehmen Sie bitte den jeweiligen Gebrauchsanleitungen.

Stand der Informationen: Juni 2014



Wir sind zertifiziert nach
DIN EN ISO 13485



DB/iSURO/10-14